


Kolostomie Produkte



GRIBI AG BELP

GRIBI AG Belp

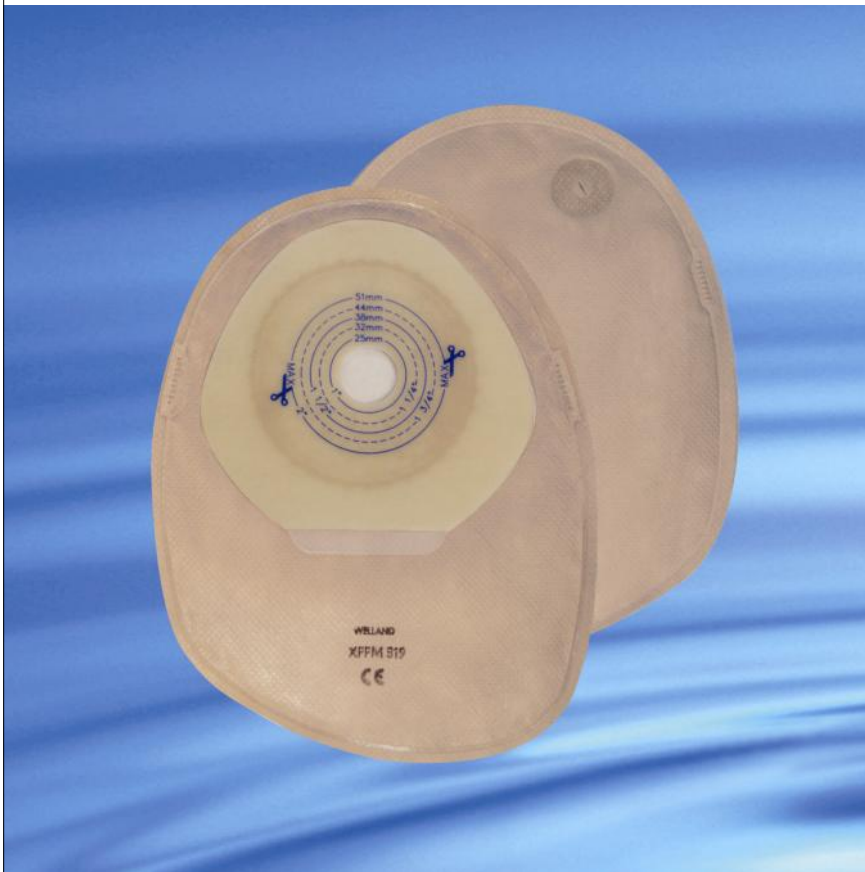

Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren

„Die Katze im Sack kaufen“ - ist ein bekanntes Sprichwort und wird im Wörterbuch für Redensarten wie folgt definiert:

etwas **kaufen**, ohne es vorher gesehen / geprüft zu haben;
sich auf etwas Unbekanntes einlassen

Wir möchten schon, dass Sie sich auf etwas Unbekanntes einlassen (nämlich auf unsere Stomaprodukte der Marken Qualimed und Welland) , jedoch ohne die sprichwörtliche Katze im Sack kaufen zu müssen.

Diese Broschüre stellt Ihnen unser Sortiment an Kolostomiebeuteln vor und zeigt Ihnen die Stärken und Vorteile unserer Produkte auf.

Um Ihnen den Katzenkauf im Sack zu ersparen, finden Sie auf der letzten Seite dieser Broschüre eine Musteranforderungskarte, damit Sie unsere Produkte vor dem Kauf prüfen können und sich von der hohen Qualität bei gleichzeitigem Tragekomfort überzeugen können.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre

Mit freundlichen Grüßen

Ihre GRIBI AG Belp



Welland FlairXtra™



Mit Welland FlairXtra™ bieten wir Ihnen den weltweit ersten über die Toilette zu entsorgenden Kolostomiebeutel an. Welland FlairXtra™ macht Sie wieder etwas unabhängiger und löst Ihre Entsorgungsproblematik auf Reisen, bei der Arbeit oder auf Visite bei Freunden.

Welland FlairXtra™ baut sich innerhalb von drei Wochen in der Kläranlage vollständig und umweltverträglich ab, also in der gleichen Zeit, wie sich Fäzes in unseren Kläranlagen abbaut.

Sicher ist es für Sie wichtig zu wissen, dass dieser Beutel die Umwelt nicht zusätzlich belastet.

Welland FlairXtra™ ist ein Durchbruch in der Herstellungstechnologie von Stomabeuteln und gibt Ihnen die vertraute Sicherheit für ein normales Leben.

Welland FlairXtra™ über die Toilette zu entsorgen - schnell und einfach

- Die Ausscheidungen gelangen in einen Innenbeutel, welcher von einer Schutzhülle umgeben ist
- Der Innenbeutel wird von der Schutzhülle abgerissen und einfach die Toilette heruntergespült. Die saubere Schutzhülle wird mit dem normalen Hausmüll entsorgt

Welland FlairXtra™ gut und einfach mit Vorteilen für Sie

- Maximale Diskretion - moderne und kompakte Form; einfach, schnell zu applizieren und zu entfernen
- Maximale Unabhängigkeit - fortgeschrittene Filtertechnologie und kompromisslose Sicherheit des Beutels



Diskret, Toiletten-spülbar, unabhängig

Welland FlairXtra™ ist ein technologischer Durchbruch in der Herstellung von Stomabeuteln und gibt dem Anwender Freiheit und erweitert sein Angebot.

Es ist der erste und einzige Toiletten-spülbare Stomabeutel. Im Abwassersystem angelangt und in Kontakt mit Wasser, wird der Innenbeutel und die Basisplatte umweltverträglich aufgelöst. Während der Beutel durch das Abwassersystem fließt, wird er allmählich aufgelöst wie sich auch Toilettenpapier auflöst. Dies verhindert ein Verstopfen von Abwasserrohren. *Welland FlairXtra™* ist einfach zu verwenden und erlaubt eine saubere und hygienische Alternative zu gebräuchlichen Entsorgungstechniken von Stomabeuteln.



Der neue Toiletten-spülbare Beutel hat das Potential um die Menge von Plastikabfall in unseren Kehrlichtverbrennungsanlagen drastisch zu verringern. Das weggespülte Material ist biologisch abbaubar und umweltverträglich. Der Beutel benötigt die selbe Zeit zum Abbau in den Kläranlagen wie Fäzes.

***Welland FlairXtra™* lässt Ihnen die Freiheit zum
Geniessen der wichtigen Dinge im Leben.**



Beutelwechsel - vier einfache Schritte

Der Wechsel des Beutels gestaltet sich in vier einfachen Schritten:

Schritt 1



Legen Sie die rechte Hand auf die Basisplatte und halten diese fest. Mit der linken Hand fassen Sie den Aussenbeutel an den Markierungen.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht aus Versehen den Innenbeutel mitfassen.

Markierungen machen den richtigen Griff äusserst einfach.

Schritt 2



Reissen Sie sanft mit der linken Hand den Aussenbeutel nach links ab.

Trennen Sie den Aussenbeutel bis etwa zur Mitte der Basisplatte ab.

Schritt 3



Wiederholen Sie die beiden oben beschriebenen Handgriffe in umgekehrter Richtung und reissen den Aussenbeutel ab, bis Sie diesen über den Innenbeutel abziehen können.

Der so freigelegte und saubere Aussenbeutel wird über den normalen Hausmüll entsorgt.

Schritt 4



Werfen Sie den Innenbeutel in die Toilette und warten Sie, bis sich der Beutel mit Wasser gefüllt hat. So können Sie sicherstellen, dass der Beutel weggespült wird.

90% der Toiletten spülen den Beutel mit der ersten Spülung weg, 100% mit der Zweiten.

**Lieferprogramm Welland FlairXtra™**


Welland FlairXtra™ ist in zwei Formen mit unterschiedlichen Kapazitäten für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich und Sie erlangen dadurch den grösstmöglichen Tragekomfort.



Welland FlairXtra™ wurde für eine besonders gute und unauffällige Passform und den sicheren Halt auf der Haut konzipiert.

Welland FlairXtra™ bietet Ihnen ein unübertroffenes Filtersystem dank dem patentierten "DUAL-CARB" - Filter.

Welland FlairXtra™ verhindert dank dem durchdachten Produkt-Design Leckagen.

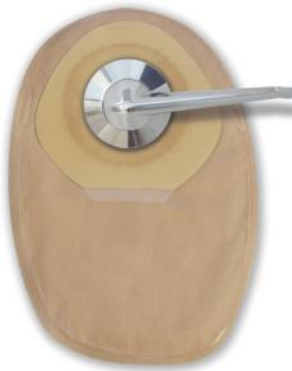Welland FlairXtra™ mit Innenbeutel, welcher einfach entfernt und über die Toilette entsorgt wird, während der saubere Aussenbeutel in den normalen Hausmüll gegeben wird.



	Grösse	19 mm	25 mm	29 mm	32 mm	35 mm	38 mm	44 mm
	MAXI	XFFL519	XFFL525	XFFL529	XFFL532	XFFL535	XFFL538	XFFL544
	MIDI	XFFM519	XFFM525	XFFM529	XFFM532	XFFM535	XFFM538	XFFM544

Packung: 30 Beutel



Welland Flair™ Kolostomie



Der Kolostomiebeutel mit *Flair*. Hautfreundlichstes Hydrokolloid und die unerreichte Geruchsfilterung zeichnen diesen Kolostomiebeutel aus.

Das geschlossene Flair Kolostomiesystem bietet Ihnen eine brandneue Dimension an Sicherheit und Freiheit an, wie sie noch nie vorher entwickelt wurde.

Wir haben alle wichtigen Schlüsselfaktoren genommen, diese weiterentwickelt und die neue Generation von Flair Kolostomiebeuteln kreiert, welche Ihnen neue und bessere Werte in Bezug auf Diskretion, Sicherheit, Tragekomfort und Zufriedenheit bieten.

Die neue tränenförmige Hydrokolloid-Basisplatte ist angenehm zu tragen und garantiert Ihnen höchste Haftung und fördert gleichzeitig die Heilung von gereizter oder verletzter Haut. Die flexible Hydrokolloid-Basisplatte stellt eine perfekte Passform in alle Richtungen sicher und erhöht Ihren Komfort für einen normalen und aktiven Lebensstil.

Die moderne Form des Beutels wurde für eine optimale Passform in der Leistengegend entwickelt. Dieser Beutel hat den Vorteil, dass der Inhalt in jedem Fall zum unteren Beutende gelangt.



Das revolutionäre „Dual-Carb®“ Filtersystem garantiert eine perfekte Geruchsfilterung aller Verdauungsgase und gewährt Ihnen deshalb die grösste Sicherheit. Sie können ohne Bedenken jeden Raum betreten und sich unter Menschen mischen ohne nur eine Sekunde an der Sicherheit des Filtersystems zu zweifeln.

Welland Flair™ gibt es in zwei Grössen: Die mittlere Grösse (Midi) ist ideal für kleinere Frauen oder Stoma-patienten mit kleineren Ausscheidungsvolumen oder für



den Fall, dass Sie einen kleineren Beutel für spezielle Zwecke wünschen. Die grosse (Maxi) Beutelform ist ideal für Männer oder Stomapatienten mit höheren Ausscheidungsvolumen.

Lieferprogramm **Welland Flair™**

Welland Flair™ ist in zwei Formen mit unterschiedlichen Kapazitäten für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich und Sie erlangen dadurch den grösstmöglichen Tragekomfort.

Welland Flair™ wurde für eine besonders gute und unauffällige Passform und den sicheren Halt auf der Haut konzipiert.

Welland Flair™ bietet Ihnen ein unübertroffenes Filtersystem dank dem patentierten "DUAL-CARB" - Filter.

Welland Flair™ mit der flexiblen Hydrokolloid-Basisplatte für eine perfekte und angenehmste Passform in der Leistengegend.

Welland Flair™ verhindert dank dem durchdachten Design Leckagen.



Grösse	13 mm	25 mm	29 mm	32 mm	38 mm	13 mm Transparent
	XFLC513	XFLC5125	XFLC529	XFLC532	XFLC538	XFLC713

Packung 30 Beutel



Welland Flair™ Oval Kolostomie



Maximale Flexibilität und den ultimativen Komfort, für all jene Stomapatienten mit Platzbauch und grossen unregelmässigen Stomas. Dank der ovalen Form bekommen Sie nicht nur den grösstmöglichen Tragekomfort, sondern auch die grösstmögliche Sicherheit für Ihren aktiven und bewegungsreichen Tag.

Welland Flair™ Oval wurde speziell in der Klinik von Stomatherapeuten entwickelt für Stomapatienten mit einem elipsenförmigen, vorstehendem oder grossem unregelmässigem Stoma und/oder Platzbauch. Die Hautschutzplatte von Flair™ Oval ist aus dem patentierten Welland HyperFlex® Hydrokolloid hergestellt worden und die ovale Form der Hautschutzplatte garantiert Ihnen eine maximale Haftung der Platte und die grösstmögliche Sicherheit. Besonders hilfreich ist die grosse und ovale

Hautschutzplatte, welche eine grössere Hydrokolloidfläche für grosse und unregelmässige Stomas bietet.

In manchen Fällen ist die zusätzliche Hydrokolloidfläche besonders praktisch und bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit und Komfort.

Das schmale Profil des Flair™ Oval sichert Ihnen den grösstmöglichen Tragekomfort und verhindert Scheuer- und Druckstellen unter der Kleidung und trägt auch nicht auf.

Die Hautschutzplatte aus Welland HyperFlex® Hydrokolloid ist extrem flexibel und sichert deshalb eine optimale Haftung bei grösstmöglicher Sicherheit und ist in alle Richtungen dehnbar.





Die aufgedruckte und gut sichtbare Ausschneidehilfe macht das patientenbezogene Zuschneiden der Öffnung zum Kinderspiel.

Lieferprogramm **Welland Flair™ Oval**

Welland Flair™ Oval ist als transparenter und beige Beutel erhältlich.

Welland Flair™ Oval wurde für eine besonders gute und unauffällige Passform und den sicheren Halt auf der Haut konzipiert.

Welland Flair™ Oval mit der flexiblen HyperFlex® Hydrokolloid-Hautschutzplatte für eine perfekte und angenehme Passform in der Leistengegend.

Welland Flair™ Oval verhindert dank dem durchdachten Design Leckagen.

Grösse	13 mm
Beige	XFCV513
Transparent	XFCV713

Packung 10 Beutel



Welland Curvex® Kolostomie




Die gewölbte Form der Basisplatte der Curvex®-Beutel passt sich besser an das Stoma an und macht Ihre Versorgung dadurch sicherer. Curvex® ist besonders bei unebenen und zu Leckagen neigenden Stomas zu empfehlen, wobei die Basisplatte wie bei allen Welland Beuteln sehr flexibel und weich ist und Ihnen den grösstmöglichen Tragekomfort gewährt.

Der dreidimensionale Flansch erspart Ihnen die Verwendung von teurer Stomapaste, zusätzlichen Fixierpflastern und Stomagürteln.

Die Curvex Beutel gibt es mit drei verschiedenen Plateaugrössen:

Das **25mm Plateau** mit einer Startöffnung von 13mm kann bis zu 25mm ausgeschnitten werden. Es stehen jeweils beige und transparente Beutel zur Auswahl.

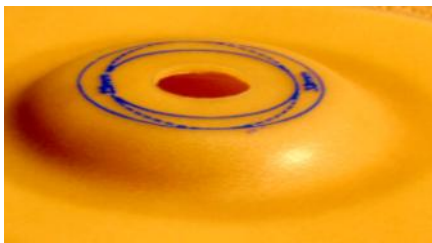

Das **32mm Plateau** mit einer Startöffnung von 13mm kann bis zu 32mm ausgeschnitten werden. Es stehen jeweils beige und transparente Beutel zur Auswahl.


Das **43mm Plateau** mit einer Startöffnung von 13mm kann bis zu 43mm ausgeschnitten werden. Es stehen jeweils beige und transparente Beutel zur Auswahl.

Die richtige Auswahl der Plateaugrösse gewährt Ihnen den optimalen Tragekomfort und die grösstmögliche Sicherheit.



Um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Beutels zu helfen, finden Sie nachstehend eine kleine Hilfe für das Vorgehen zur Bestimmung der geeigneten Grösse für Ihre Bedürfnisse:

Am nachfolgenden Beispiel wird erklärt, wie Sie den geeigneten Curvex Kolostomiebeutel auswählen:

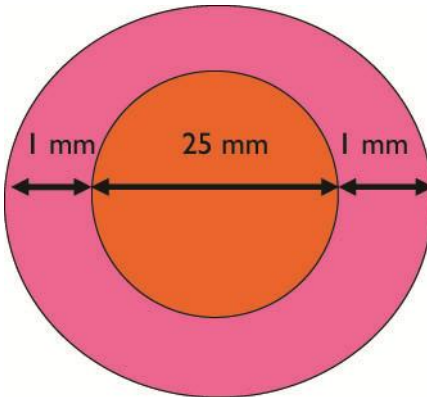

Sie messen einen Stomadurchmesser von 25mm und rechnen noch zusätzlich je 1 mm rund um das Stoma als Abstand dazu und erhalten einen Messwert inkl. Abstand von 27mm. Demzufolge wird die mittlere Plateaugröße (32mm) benötigt, welche auf 27mm ausgeschnitten wird (Alternativ kann auch das grosse Plateau verwendet werden).

Übersichtstabelle für Curvex®

Stomadurchmesser +	Plateaugröße
11—23 mm	Kleine Plateaugröße 25mm
13—30mm	Mittlere Plateaugröße 32mm
13—41mm	Grosse Plateaugröße 43mm

Wie stellen Sie sicher, dass die Basisplatte richtig passt:

Wenn Curvex® in der richtigen Grösse ausgewählt wurde, so bietet Ihnen dieses Produkt grössten Tragekomfort und ist trotzdem frei von Leckagen. Wichtig ist, dass Sie beide Werte Messen, den Stomadurchmesser und die unebene Region rund um das Stoma, wie im Bild unten gezeigt.



So stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Plateaugrösse ausgewählt haben und auch den vollen Komfort von Curvex® nutzen können.



Für welche Stomas ist Curvex® besonders geeignet:



Lieferprogramm Welland Curvex®

Welland Curvex® ist als transparenter und beiger Beutel erhältlich

Welland Curvex® wurde speziell für schwierige und unebene Stomaanlagen konzipiert

Welland Curvex® mit der extrem flexiblen und gewölbten (convexen) Basisplatte

Welland Curvex® mit drei verschiedenen Plateaugrößen für eine sichere Anwendung ohne Leckagen und grösstmöglichen Tragekomfort

Welland Curvex® schont die Haut und macht die zusätzliche Anwendung von Fixierpflastern und Stomapasten überflüssig.

Grösse	25 / 13 mm	32 / 13 mm	32 / 25 mm	32 / 32 mm	43 / 13 mm	43 / 32 mm
Beige	CCS513	CCM513	CCM525	CCM532	CCL513	CCL532
Transp.	CCS713	CCM713	CCM725		CCL713	

Packung 10 Beutel

Ja, ich möchte die Produkte testen. Senden Sie mir bitte Muster von:

Welland FlairXtra™

Welland Flair™

Welland Flair™ Oval

Welland Curvex®

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Vorname: Name:

Adresse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Stoma-Durchmesser: mm

✂ Bitte ausschneiden und einsenden an:

GRIBI AG BELP

Hühnerhubelstrasse 59 CH-3123 Belp

Telefon 031 818 40 80

Telefax 031 818 40 85

E-Mail info@gribi.ch

Internet <http://www.gribi.ch>